


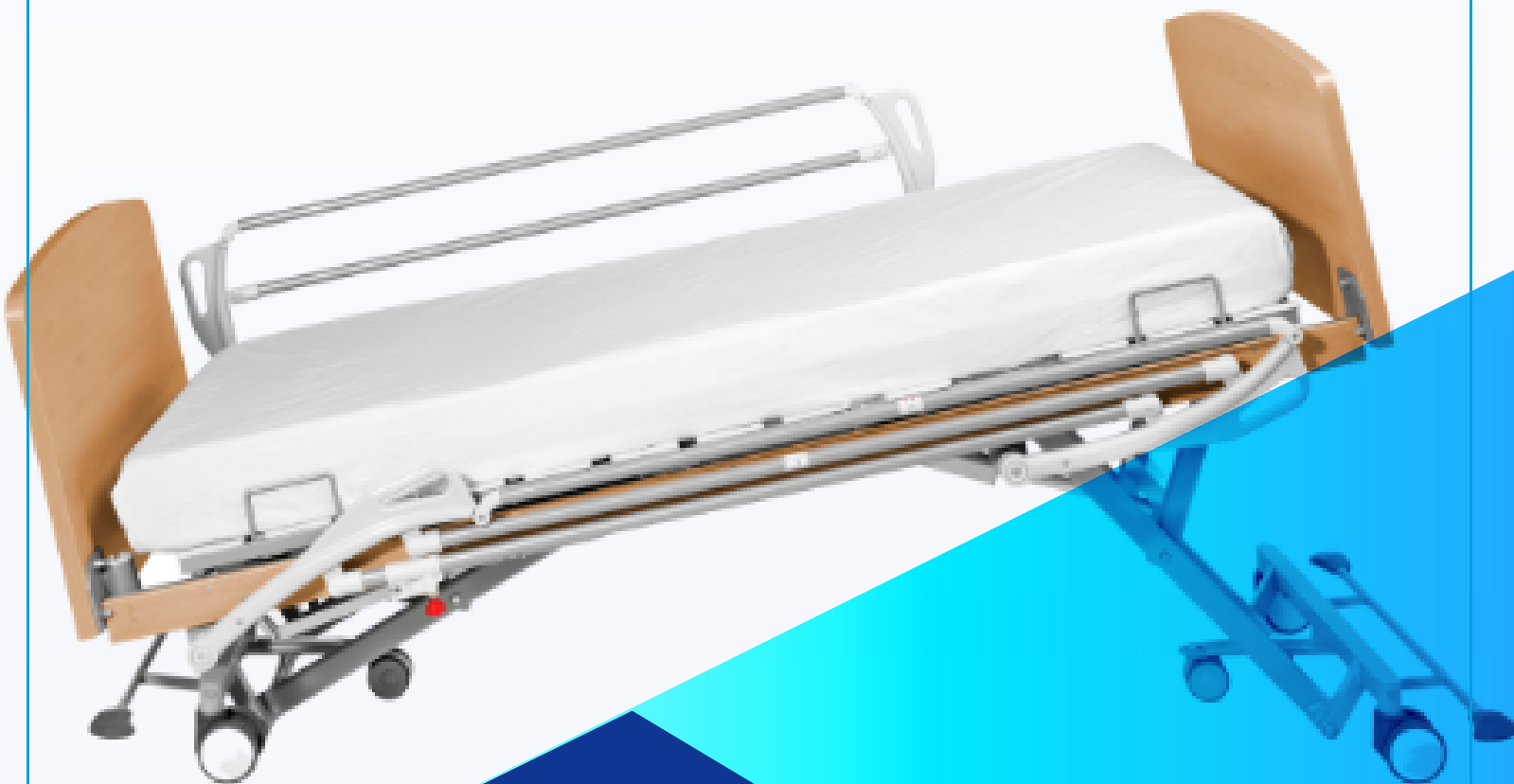

VIDA 300

Medisa Americas

Cuauhtémoc 152-A Col. Tizapán Álvaro Obregón
CP 01090 CDMX, México
info@medisa-americas.com

**Fabricante
Medical Ibérica**

C/ Lanzahíta, nº 6- Polígono Industrial Albarreja 28946,
Fuenlabrada, Madrid, España

CARACTERÍSTICAS



Confort y cuidados individuales gracias a sus numerosas funciones



Con los nuevos sistemas de la cama VIDA 300 adelantamos los procesos de mejora del paciente, gracias a su avanzado diseño ergonómico que aumenta su autonomía, movilidad y seguridad



Disminuye el esfuerzo físico necesario para mover a los pacientes




Somier ergonómico contribuye a la mejoría de las úlceras por presión



Cabecero y piecero curvos realizados de madera de haya maciza vaporizada sin nudos



Barandillas abatibles con diseño y sistemas de seguridad, según normativa En 60601-2-52

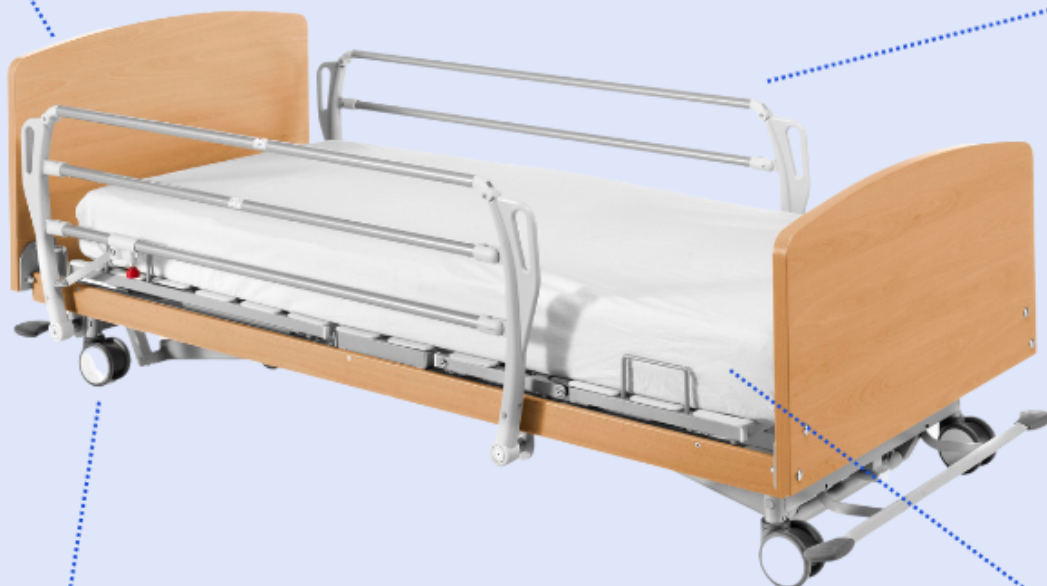

Concepto innovador de ruedas: movimiento fácil y seguro



Múltiples posiciones ergonómicas y de seguridad

CARACTERÍSTICAS

Regulación en altura

▲
MÁX. 80 cm

Puede elevarse hasta 80 cm., lo que simplifica las intervenciones de los cuidados diarios en la cama y el personal asistencial puede trabajar de manera ergonómica y con la espalda relajada



▼
MIN. 19 cm

Puede bajar hasta los 19 cm para una prevención óptima contra las consecuencias de las caídas

Sistema de doble parada

**Segunda parada
39 cm**



Para salida
segura y cómoda

**Primera parada
29 cm**



Para evitar
atrapamientos



CARACTERÍSTICAS

Estructura y somier

- Bastidor de estructura metálica en tubo de acero
- Sistema de elevación soportado por compases y actuadores lineales
- Dos puntos de apoyo en cada estructura de la base de la cama permiten distribuir la carga de manera uniforme para lograr una estabilidad lateral óptima
- Recubrimiento de pintura electro-estática con acabado en epoxy y tratamiento antibacteriano y anticorrosivo
- Somier articulado eléctrico de 4 planos independientes, realizados en ABS muy resistentes a la deformación y rotura
- Planos del somier fácilmente desmontables sin ningún tipo de herramienta

Innovación

- 1.- La cama VIDA 300 dispone de un software que sincroniza los movimientos del somier y las posiciones terapéuticas
- 2.- Este evita el desplazamiento y el correspondiente reposicionamiento del paciente
- 3.- Al realizar movimientos, los planos del somier se articulan e forma sincronizada, manteniendo al paciente y al colchón de en la misma posición



MANDO DE CONTROL

- Movimientos de Trendelenburg +1
- Movimientos de Antitrendelenburg -15° mediante de accionamiento eléctrico
- Sistema antidecúbito, regresión automática del plano de tronco. Al posicionar el plano de respaldo separa el espacio de la pelvis hasta 15 cm, ofreciendo una protección frente a las úlceras por presión.
- Un posicionamiento adecuado es el factor más importante a la hora de prevenir úlceras de decúbito por presión.




MANDO DE CONTROL

- Retroiluminado: facilita su uso en momentos de baja iluminación
- Incluye dos funciones pre-programadas para colocar la cama en posición de silla cardíaca y de salida
- Dispone de botón de posición de salida, el cual facilita al paciente abandonar la cama al descender la altura y sección de pies hasta su posición mínima, permaneciendo el respaldo a su máxima angulación
- Combinación de botones para descenso seguro de la cama: cuando la cama se encuentra a 29 cm manteniendo pulsado durante unos segundos los dos botones, el mando parpadea y emite un sonido/alarma avisando que la cama va a bajar a su altura mínima de 19 cm. Con esto se garantiza la seguridad evitando la colisión y atrapamientos

PANEL DE ENFERMERÍA

Permite al profesional médico trabajar de forma eficaz y controlar la cama desde diferentes ubicaciones. Cuenta con funciones predeterminadas prácticas y de activación de alarmas de seguridad.

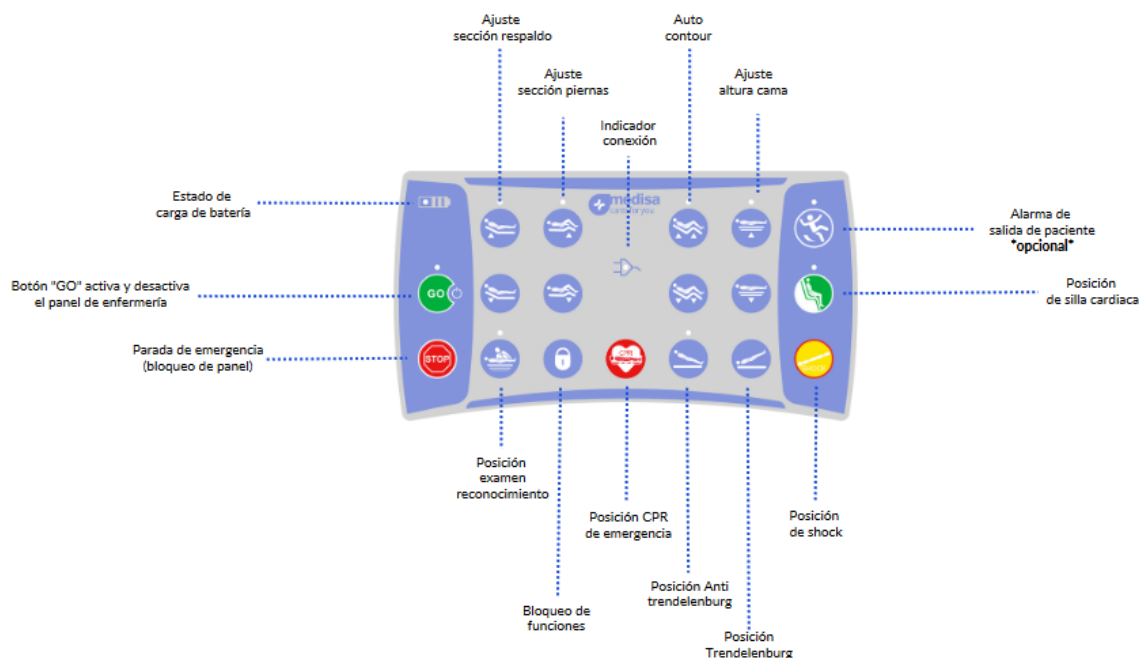

ACCESORIOS

Luces de posición

Luz verde si la cama se encuentra en la posición más baja
Luz naranja si la cama se eleva desde la posición más baja
Luz nocturna de cortesía de la cama hacia el suelo

Pasadores

Las secciones de la cama incorporan 6 pasadores

Arquillos laterales

Evitan desplazamientos del colchón y la fijación del paciente

Soportes bolsas de drenajes laterales

Soportes compuestos por ganchos para drenajes, orina y porta accesorios.

Listón para cables

La cama en la parte frontal incorpora una pletina para sujetar el cable de red

Soporte para accesorios

La cama incorpora soportes que permiten la adaptación de accesorios a ambos lados del cabeceo



SEGURIDAD

- Luz de posicionamiento de seguridad de doble led
- Protección IP66 contra agua y polvo
- Respaldo con parada automática con angulación de 30°
- Panel de control de enfermería que cancela las funciones
- Mandos con desconexión automática
- Sistema de anti-pinzamiento
- Sistema de seguridad de descenso de emergencia
- Barandillas con sistema de bloqueo automático



Personalización

Cada hospital o residencia puede cambiar, incluir o quitar las especificaciones, accesorios y opciones de nuestro mobiliario para

Adaptarlo totalmente a su instalación.

- Diseño
- Eficaz
- Fácil de mover
- Autonomía y la rehabilitación del paciente
- Características para ahorrar tiempo a las enfermeras y fisioterapeutas

La cama VIDA 300 cumple con los requisitos de marcado C.E., en los términos y condiciones establecidos en el nuevo **Reglamento 745/2017** por el que se regulan los productos sanitarios.

El proceso de fabricación se ha llevado a cabo de acuerdo con el Sistema de Gestión de Calidad implantado en la organización con arreglo a la norma **EN ISO 9001:2015 y normas medioambientales EN ISO 14001:2015**



NORMATIVAS DE REFERENCIA

UNE-EN ISO 60601-1

Equipos electromédicos.

Parte 1: requisitos generales para la seguridad básica y funcionamiento esencial
UNE-EN ISO 60601-2-52

Equipos electromédicos.

Parte 1-2: requisitos generales para la seguridad básica y funcionamiento esencial

UNE-EN ISO 60601-2-52


Equipos electromédicos.

Parte 2-52: requisitos particulares para la seguridad básica y funcionamiento esencial de las camas de hospital

UNE-EN ISO 62366-1

Productos sanitarios.

Parte 1: aplicación de la ingeniería de usabilidad a los productos sanitarios

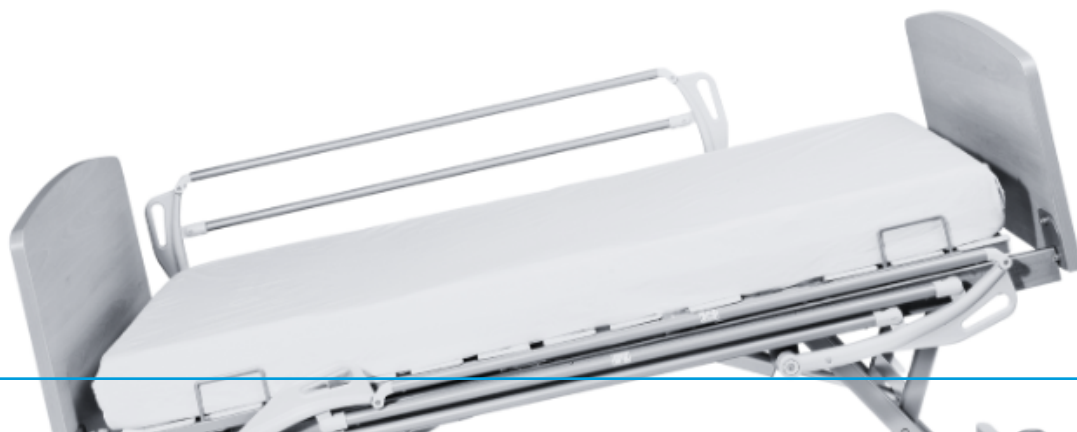

DATOS ELÉCTRICOS

Alimentación eléctrica	240-110V / 50-60 Hz
Consumo máximo	1.6 A, 370 Volt
Indicador de protección	IP 66
Clase de protección	Clase II
Grado de protección frente a descarga	Tipo B

Datos Técnicos

- Dimensión externa 210 x 101 cm
- Dimensión superficie paciente 200 x 90 cm
- Elevación de altura 19 x 79 cm
- Inclinación del respaldo 65°
- Inclinación de los pies ±15°
- Trendelenburg/antitrendelenburg 45°
- Autoregresión de plano de tronco/piernas 15 cm / 5 cm
- Carga máxima 230 kg